

scala®

Elektronický odšívovací hřeben SC 04



CZ Návod k použití



UPOZORNĚNÍ

Pro bezpečné a vhodné použití vašeho odšívovacího hřebenu si přečtěte, prosím, pozorně tento návod.

OBECNÉ INFORMACE

1. Elektronický odšívovací hřeben SC 04 není lékařským přístrojem.
2. Elektronický odšívovací hřeben SC 04 musí být používán na dětech pouze dospělou osobou.
3. Elektronický odšívovací hřeben SC 04 není voděodolný.
4. Když je přístroj ZAPNUTÝ, nedotýkejte se prsty kovového hřebenu.


6. Elektronický odšívovací hřeben SC 04 nesmí být používán nebo aplikován na osoby trpícími epilepsií a/nebo u pacientů se srdečním selháním.

7. Elektronický odšívovací hřeben SC 04 může narušit provoz elektronických zdravotnických přístrojů.

JAK ELEKTRONICKÝ ODŠÍVOVACÍ HŘEBEN SC 04 FUNKUJE?

Elektronický odšívovací hřeben SC 04 funguje tak, že vysílá malý elektrický náboj ke kovovému hřebenu. Když kovový hřeben pročesává suché vlasy, tento elektrický náboj usmrcuje dospělé vši. LED kontrolka elektronického odšívovacího hřebenu bude svítit červeně, pokud byla veš detekována, usmrcena a zachycena v kovovém hřebenu. V tomto případě jednoduše odstraňte veš pomocí mini-kartáčku. Elektronický odšívovací hřeben SC 04 neusmrtí vší vajíčka, některé z nich navíc mohou zůstat uchycené na vlasovém folikulu. Doporučuje se proto, aby ošetření elektronickým hřebem bylo zopakováno každé 2-3 dny po dobu 16 dnů, aby byly odstraněny všechny vši.

POPIS PŘÍSTROJE

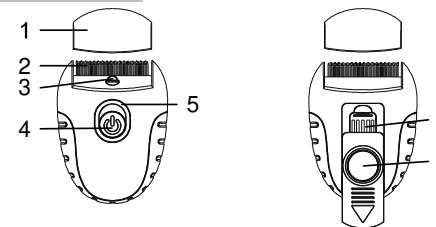


- 1 Kryt hlavice, 2 Kovový hřeben, 3 LED bodové světlo,
4 Vypínač, 5 LED kontrolka, 6 Mini-kartáček, 7 Lupa


CZ-2

FUNKCE TLAČÍTEK


1. stupeň: Vypnutí
Posuňte vypínač dozadu (první pozice) pro vypnutí přístroje.

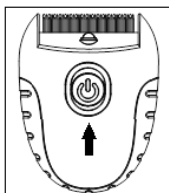

2. stupeň: Zapnutí
Posuňte vypínač dopředu (druhá pozice) pro zapnutí odvlhčovacího hřebenu, LED kontrolka bude svítit zeleně. V případě, že kapacita baterie je nedostatečná, pak LED kontrolka bude svítit červeně po dobu pěti sekund, a poté se přístroj vypne.

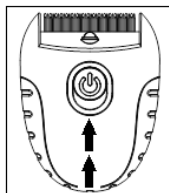

3. stupeň: Zapnutí & zapnutí LED světla
Posuňte vypínač dopředu (třetí pozice), tím zapnete odvlhčovací hřeben a LED bodové světlo.

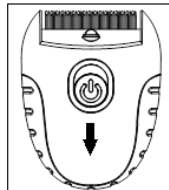


JAK POUŽÍVAT

Před použitím přístroje:

- Před použitím tohoto elektronického přístroje musí být vlasy suché a čisté. Pro dosažení nejlepších výsledků by měly být vlasy bez stylingových přípravků, jako je pěna, gel atp.
- Před ošetřením důkladně pročešte vlasy svým hřebenem, který pravidelně používáte, aby vlasy nebyly zacuchané.

CZ-3

1. Odstraňte kryt hlavice. Posuňte vypínač dopředu na 2. stupeň pro zapnutí přístroje, LED kontrolka bude svítit zeleně. Posuňte vypínač dopředu dopředu na 3. stupeň, aby se zapnul LED bodové světlo.

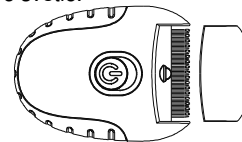

2. Uchopte hřeben pod úhlem 45 stupňů (tlačítko ON musí směřovat nahoru směrem k uživateli) a spusťte česání kovovým hřebenem v blízkosti vlasových kořínků. LED bodové světlo vám pomůže vidět veš za špatných světelných podmínek nebo u osob s tmavými vlasy.

3. Je-li hřeben zachycen a veš usmrcena, LED kontrolka svítí červeně.

4. Zastavte česání vlasů a odstraňte veš z kovového hřebenu. K vyčištění kovového hřebenu použijte mini-kartáček. Pokud je veš vyčištěna, LED kontrolka svítí zeleně a hřeben je opět připraven k použití.



Demonstrační video, jak správně používat odvlhčovací hřeben najdete na internetu: <https://youtu.be/XL5d8OEJL8k>

CZ-4


BATERIE

Upozornění:

1. Odvšivovací hřeben používá baterii 1 AAA.
2. Baterie musí být uloženy mimo dosah dětí.
3. Vždy používejte baterie daného typu a specifikace, uvedené v tomto návodu.
4. Prosakující baterie mohou poškodit přístroj. Doporučuje se vyjmout baterii za předpokladu, že přístroj nebude delší dobu používán.
5. Baterie vždy likvidujte v souladu s platnými právními předpisy. Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu.

VÝMĚNA BATERIE

Chcete-li vyměnit baterii, posuňte a otevřete kryt baterie a vyjměte baterii. Baterii je nutné dát tak, jak je uvedeno uvnitř prostoru pro baterie.

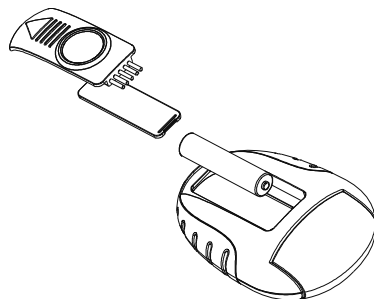


CZ-5

ČIŠTĚNÍ A UCHOVÁVÁNÍ

Čištění:

- Kovový hřeben lze čistit pomocí přiloženého mini- kartáčku.
- Vypněte přístroj a obraťte kovový hřeben směrem dolů. Pro vyčištění kovového hřebenu použijte vatový tampón nebo měkkou bavlnu navlhčenou v roztoku 70% alkoholu.

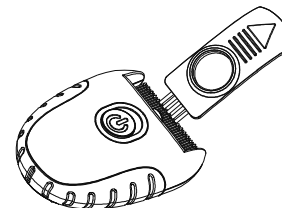

Uchovávání:

Skladujte přístroj na bezpečném, suchém a bezprašném místě, pokud ho nepoužíváte. Vyhněte se extrémním teplotám. Nepokoušejte se přístroj rozebrat.

INFORMACE K LIKVIDACI



Vadné přístroje nebo přístroje, které jsou vyřazeny z provozu na konci své životnosti, mohou stále obsahovat zbytky, které by mohly představovat riziko pro životní prostředí. Zlikvidujte, prosím, přístroj vhodným a správným způsobem na sběrném místě pro staré elektrické spotřebiče.



Baterie musí být správně zlikvidovány. K dispozici jsou kontejnery pro likvidaci baterií u prodejců baterií a ve sběrných místech komunálního odpadu.







ZÁRUČNÍ LHŮTA

Poskytujeme zákonem stanovenou záruční lhůtu. Zaručujeme dokonalé provedení tohoto výrobku. Během záruční lhůty

CZ-6

opravíme všechny vady materiálu nebo výrobní vady. Pokud se vady v rozporu s očekáváním vyskytnou, pošlete prosím přístroj zpět na naše oddělení služeb zákazníkům. Přiložte doklad o zakoupení a popis vady, aby bylo možné tento problém napravit co nejdříve. Neposkytujeme záruku v případě, že přístroj je špinavý.

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

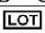	Výrobce
	V souladu s pravidly EU
	Informace k likvidaci
	Přečtěte si návod k použití
	Vyrobena měsíc/rok
	Uchovávejte v suchu

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Provozní prostředí: 10°C - 40°C,
při relativní vlhkosti: 25% - 80%

Rozměry: 90 x 60 x 27 mm

Hmotnost: 42 g (bez baterie)

Baterie: 1 x AAA alkalická baterie (LR03)



K-jump Health Co. Ltd.
No. 56, Wu Kung 5th Rd.
New Taipei City 24890
Taiwan

Distribuce / zákaznický servis
SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf
Německo