

scala®

Dosetten "Vergiss nix"

- Klockslag med kvartsprecision,
- varje dag upp till 5 larmtider,
- larm akustiskt, vibrerande eller akustiskt och vibrerande



SE Bruksanvisning

CE

Dosetten "Vergiss nix" (glöm inte) med fem larmtider

Vi gratulerar till köpet av den här kvalitetsprodukten från Scala. För att använda produktens funktioner fullt ut, är det viktigt att göra sig förtrodd med bruksanvisningen innan första användningen. Spara den ordentligt för senare bruk.

Särskilda egenskaper:

Dosetten hjälper till att organisera ditt dagliga medicinintag och påminner om medicineringstiderna med de inställbara larmtiderna.

Andra fördelar med dosetten:

- Inbyggt kvartsur med LCD-display (sifferhöjd: 13 mm).
- 5 larmtider per dag kan programmeras. När larmtiderna har programmerats, upprepas de varje dag.
- Larmet görs akustiskt, vibrerande eller akustiskt och vibrerande.
- En blå belysning ger säker användning också när det är mörkt.

Säkerhetsinformation/användningssyfte:

- ♦ Dosetten innehåller smådelar (batterier etc.) som barn skulle kunna svälja och därmed innebära livsfara. Förvara därför apparaten utom räckhåll för småbarn. Om någon har svält ett batteri eller någon annan del, måste man omedelbart uppsöka läkare.
- ♦ Skydda apparaten mot solljus, temperaturer över 50°C och mot att vatten tränger in.
- ♦ Tappa inte dosetten, öppna endast apparaten för batteribyte, vid störningar eller utför "reset" vid felfunktion.
- ♦ Använd endast apparaten som dosett, all annan användning gäller som icke avsedd och är härmad i tillverkarens namn förbjudet.

Information om avfallshantering



Defekta eller uttjänta apparater kan innehålla rester som skulle kunna utgöra en risk för miljön. Avfallshandla apparaten korrekt som elskrot hos kommunens återvinningscentral.



Batterier måste avfallshandlas fack-mässigt. Batteribehållare finns i handeln som säljer batterier och å på kommunens återvinningsstationer /mijöstationer.

Arrataten



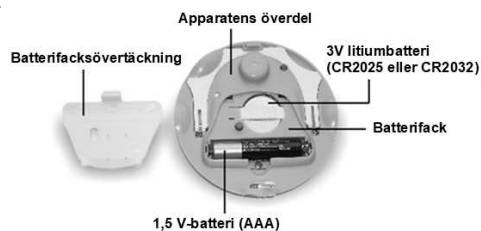
Innan dosetten börjar användas, öppnar du apparaten (använd skjutreglaget "OPEN"), öppna sedan batterifacket och dra bort båda skyddsremarna från batterierna.

Sätta i batteri eller byta ut ett förbrukat batteri

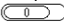


Dosetten drivs av två batterier. Litiumbatteriet CR 2025 eller CR 2032 försörjer klockan, ett AAA-batteri (LR03) behövs för larmfunktionerna (akustiskt, vibrerande eller akustiskt och vibrerande) och belysningen för LCD-displayen.


För att byta batteri, öppnar du dosetten med skjutreglaget "OPEN ►" på sidan av apparaten (i pilriktningen). Det går nu att komma åt batterifacket i överdelen. Se till att batterierna sätts in i rätt läge!

Batteriet behöver bytas ut när LCD-displayen får sämre kontrast eller när belysning eller larm blir svagare.

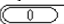


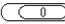


Ställa in klockslaget

1. Skjut skjutknappen "HOLD" på sidan av apparaten till läget:  HOLD ►
2. Tryck ca 3 sekunder på inställningsknappen för klockslaget (T-SET). På LCD-displayen visas  och timmarna blinkar.
3. Genom att vrida på tidsinställningsringen kan du ställa in timmarna.
4. Tryck igen på inställningsknappen för klockslaget (T-SET) och minuterna blinkar. Med tidsinställningsringen ställer du in minuterna.
5. Genom att trycka en gång till på knappen "T-SET", avslutar du tidsinställningen. På LCD-displayen slocknar .

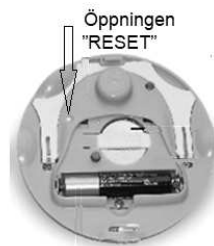
Om du skuter skjutknappen "HOLD" till läget  HOLD ► är alla knappar utan funktion. Dvs. skjutknappen "HOLD" är säkringen mot att aktivera knappar oavsiktligt.

Ställa in de fem larmtiderna

1. Skjut skjutknappen "HOLD" på sidan av apparaten till läget:  HOLD ►
 2. Tryck ca 3 sekunder på knappen "SET" under LCD-displayen. På LCD-displayen visas  och den 1:a larmtiden "1" :-:-" blinkar.
 3. Genom att vrida på tidsinställningsringen kan du ställa in den första larmtiden i steg på 30 minuter.
 4. Tryck igen på knappen "SET" och avsluta inställningen av den första larmtiden. Nästa larmtid "2" :-:-" blinkar.
- Du kan ställa in den andra (tredje, fjärde och femte) larmtiden med precis som den första larmtiden med tidsinställningsringen. Om du endast behöver en larmtid, kopplar du vidare till den femte larmtiden med knappen "SET" och genom att trycka igen på knappen "SET" avslutar du larmtidsinställningen. På LCD-displayen slocknar  .
- När du har avslutat programmeringen av larmtiderna, skuter du skjutbrytaren "HOLD" igen till läget  HOLD ► .*

Återställa alla tider (även vid felfunktion)

Öppna dosetten genom att skjuta skjutreglaget "OPEN ►" på sidan av apparaten i pilriktningen. Tryck sedan med en tandpetare eller dylikt in i öppningen "RESET". Alla tider återställs direkt. Klock- och larmtiderna måste då ställas in på nytt.



Fylla på dosetten med mediciner

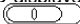

På baksidan har dosetten fem nummerade fack med plats för mediciner. Genom att vrida på den genomskinliga övertäckningen kan du fylla på medicinerna i facken och senare när larmsignalen hörs ta ut medicinerna från det aktuella facket (t.ex. larmtid 1 – fack 1 osv.)

Numrering av medicinfacken



Övertäckning för medicinfacken

LCD-displayens belysning

För att tända LCD-displayens belysning ca 10 sekunder, skjuter du först skjutknappen "HOLD" till läget:  HOLD  och trycker sedan på ljusknappen "Light".

Ställa in larmsättet

Med skjutknappen "BEEP VIB BEEP+VIB" kan du välja mellan det akustiska larmet (BEEP), vibrationslarmet (VIB) eller akustiskt larm med vibration (BEEP+VIB). Det är möjligt utan att använda skjutknappen "HOLD".



Larm/ta ut medicin

När du noterar larmet är det tid att ta ut medicinen från det fack som hör till larmtiden genom att vrida på den genomskinliga övertäckningen. Genom att vrida stänger du av larmet och larmtiden på LCD-displayen slocknar. På stället står då "-:-" igen. Larmet hörs eller vibrerar ca 30 sekunder.

Missar du att ta ut medicinen, kommer larmet ytterligare två gånger med 5 minuters mellanrum.

Om du tar ut medicinen upp till 15 minuter innan larmtiden eller bara vrider på den genomskinliga övertäckningen blockeras larmet.

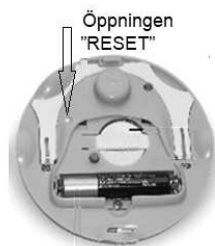
Om du har missat en larmtid och inte har tagit ut medicinen, blir larmtiden kvar på LCD-displayen som påminnelse.

I normala fall har du tagit ut all medicin och larmtiderna på LCD-displayen har växlat till "-:-". På natten kl. 0:13 aktiveras de inställda larmtiderna igen så att dosetten arbetar med de larmtider som har gjorts tidigare nästa dag.

Störningar och hur de åtgärdas

1. Öppna dosetten genom att skjuta skjutreglaget "OPEN ►" på sidan av apparaten i pilriktningen. Tryck sedan med en tandpetare eller dylikt in i öppningen "RESET". Alla tider återställs direkt. Klock- och larmtiderna måste då ställas in på nytt.

2. Om apparaten inte utför enskilda funktioner, kontrollera det batteri som styr funktionen. Under pkt. "Sätta i batteri eller byta ut ett förbrukat batteri" framgår de funktioner som hör till respektive batteri.



Garantiinformation

Vi ger en garanti på 2 år på apparaten. Kassakvittot gäller som garantibevis. Under garantitiden repareras den defekta apparaten kostnadsfritt. Garantin gäller inte för skador som beror på felaktig behandling, olyckor, att bruksanvisningen inte efterföljs eller ändringar på apparaten av tredje part.

Tekniska data

Driftsspänning

Klockfunktion:

3V (1 x CR 2032 eller CR 2025)

Ljus och larmfunktioner:

1,5V AAA-batteri (LR03)

Klocka

kvartsur, +/- 20 sekunder/månad

Larm

kan väljas: akustiskt, vibrerande eller akustiskt och vibrerande

Antal larm/dag

5

Medicinfack

5

Display

LCD-display med 13 mm sifferhöjd (klockslag)

Mått

Ø 80 mm, höjd 31 mm

Vikt

96 g (inkl. batterier, exkl. medicin)

Belysning för LCD-displayen

blå

Försäljning

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf (Germany)

Rev. 10/01/2021/SE

SE - 6