

scala®

Pojemnik na tabletki "O niczym nie zapomnisz"

- Dokładna godzina jak przystało na zegar kwarcowy,
- codziennie nawet 5 alarmów,
- alarm akustyczny, wibracyjny lub akustyczny i wibracyjny



PL Instrukcja obsługi

CE

Pojemnik na tabletki "O niczym nie zapomnisz" z pięcioma alarmami

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu firmy Scala. Aby w pełni wykorzystać zalety tego urządzenia, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Cechy szczególne:

Pojemnik na tabletki pomaga zorganizować codzienne przyjmowanie lekarstw i alarmem przypomina o ustawionych czasach przyjmowania leków.

Inne korzyści z pojemnika na tabletki:

- Wbudowany zegar kwarcowy z dużym wyświetlaczem LCD (wysokość cyfr: 13 mm).
- Możliwość zaprogramowania 5 alarmów dziennie. Po zaprogramowaniu czasy alarmów codziennie się powtarzają.
- Alarm jest akustyczny, wibracyjny lub akustyczny i wibracyjny.
- Niebieskie podświetlenie umożliwia bezpieczną obsługę nawet w ciemności.

Instrukcje bezpieczeństwa / przeznaczenie:

- ♦ Pojemnik na tabletki zawiera małe części (baterie, itp.), które mogą zostać połknięte przez małe dzieci i w ten sposób mogą stać się niebezpieczne dla życia. Dlatego urządzenie należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Jeśli bateria lub inna część została połknięta, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
- ♦ Chronić urządzenie przed światłem słonecznym, temperaturą powyżej 50°C i penetracją wody.
- ♦ Pojemnika na tabletki nie wolno upuszczać, urządzenie powinno się otwierać tylko po to, aby wymienić baterię lub wykonać "reset" w przypadku wadliwego działania lub awarii.
- ♦ Urządzenia należy używać tylko jako pojemnika na tabletki, wszelkie inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niniejszym jest zabronione przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Usuwanie zużytego produktu winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Informacji udziela administracja samorządowa.



W celu należytej utylizacji baterii w sklepach handlujących bateriami oraz gminnych punktach zbiórki udostępniono odpowiednie pojemniki. Opakowania należy usuwać odpowiednio do ich rodzaju.

Urządzenie




Przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika na tabletki należy otworzyć urządzenie (za pomocą suwaka "OPEN"), następnie otworzyć komorę baterii i zdjąć z baterii obie taśmy ochronne.

Wkładanie lub wymiana zużytej baterii

Pojemnik na tabletki jest zasilany dwoma bateriami. Bateria litowa CR 2025 lub CR 2032 zasila zegar, bateria AAA (LR03) jest niezbędna do realizacji funkcji alarmowych (akustycznych, wibracyjnych lub akustycznych i wibracyjnych) oraz do podświetlenia wyświetlacza LCD.


Aby wymienić baterię, należy otworzyć pojemnik na tabletki używając suwaka "OPEN ►" znajdującego się z boku urządzenia (przesunąć go w kierunku strzałki). Komora baterii w górnej części jest teraz dostępna. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na miejsce montowania!

Wymiana baterii jest konieczna, gdy wyświetlacz LCD utraci kontrast, lub gdy podświetlenie lub alarm staną się niewyraźne.

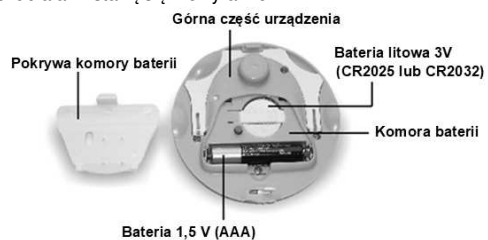

Ustawianie godziny

1. Przesunąć przełącznik suwakowy „HOLD” z boku urządzenia do pozycji:

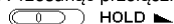

2. Naciskać przycisk ustawienia godziny (T-SET) przez ok. 3 sekundy.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się godzina i zaczną migać.

3. Przekręcić pierścień ustawienia czasu, aby ustawić godzinę.

4. Ponownie nacisnąć przycisk ustawienia godziny (T-SET) i minuty zaczną migać.

Pierścieniem ustawienia czasu należy teraz ustawić minuty.


5. Ponownie nacisnąć przycisk „T-SET”, aby zakończyć ustawianie czasu.

Na wyświetlaczu LCD zgaśnie **T-SET**.

Jeśli przełącznik suwakowy „HOLD” zostanie przesunięty do pozycji „wszystkie przyciski zostają zdezaktywowane. Oznacza to, że przełącznik suwakowy „HOLD” stanowi zabezpieczenie przed niezamierzonym włączeniem przycisków.

Ustawienie pięciu alarmów

1. Przesunąć przełącznik suwakowy „HOLD” z boku urządzenia do pozycji:

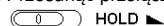

2. Naciskać przycisk „**SET**” poniżej wyświetlacza LCD przez ok. 3 sekundy.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się **AL-SET** i zacznie migać pierwszy

czas alarmu „**1** -:- -”.

3. Przekręcić pierścień ustawienia czasu, aby ustawić pierwszy czas alarmu w cyklach 30-minutowych.

4. Ponownie nacisnąć przycisk „**SET**”, aby zakończyć ustawianie pierwszego czasu alarmu.

Następny czas alarmu „**2** -:- -” zaczyna migać.

Drugi (trzeci, czwarty i piąty) czas alarmu można ustawić w taki sam sposób, jak pierwszy czas alarmu za pomocą pierścienia ustawienia czasu.


Jeśli potrzebny jest tylko jeden czas alarmu, należy użyć przycisku „**SET**”, aby przełączyć się na piąty czas alarmu i ponownie nacisnąć przycisk „**SET**” do momentu zakończenia ustawienia czasu alarmu. Na wyświetlaczu LCD zgaśnie

Po zakończeniu programowania czasów alarmu, przesunąć przełącznik suwakowy „HOLD” z powrotem do pozycji



Resetowanie wszystkich czasów (również w przypadku awarii)

Otworzyć pojemnik na tabletki przesuwając suwak „**OPEN**” z boku urządzenia w kierunku strzałki. Następnie za pomocą wykałaczki lub podobnego przyboru nacisnąć na otwór „**RESET**”. Wszystkie czasy natychmiast zostaną zresetowane. Następnie od nowa trzeba ustawić godziny i czasy alarmu.

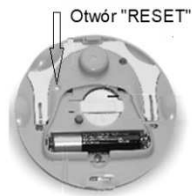

Napełnianie pojemnika na tabletki lekarskimi



Pojemnik na tabletki ma z tyłu pięć ponumerowanych przegródek, z których wyjmowane są lekarstwa. Po przekręceniu przezroczystej pokrywki można wypełnić przegródki, a następnie, gdy zabrzmi sygnał alarmu, można wyjąć lekarstwo z odpowiedniej przegródki (np. czas alarmu 1 - przegródka 1 itd.).

Numeracja przegródek na lekarstwa



Pokrywka przegródek na lekarstwa

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD na ok. 10 sekund, należy najpierw przesunąć przełącznik suwakowy „HOLD” do pozycji:  HOLD , a następnie nacisnąć przycisk „Light”.

Ustawianie typu alarmu

Za pomocą przełącznika suwakowego „BEEP VIB BEEP+VIB” można wybrać pomiędzy alarmem akustycznym (BEEP), alarmem wibracyjnym (VIB) lub alarmem akustycznym z wibracją (BEEP+VIB). Jest to możliwe bez uruchamiania przełącznika suwakowego „HOLD”.



Alarm / Wyjmowanie lekarstw

Jeśli słyszalny będzie alarm, to wtedy oznacza on czas wyjęcia lekarstwa z przegródki przypisanej do czasu alarmu po przekręceniu przezroczystej pokrywki. Przekręcenie pokrywki wyłącza alarm, a czas alarmu na wyświetlaczu LCD gaśnie. Zamiast tego ponownie zostanie wyświetlone "-:-". Alarm brzmi lub wibruje przez ok. 30 sekund.

Jeśli lekarstwo nie zostanie wyjęte, alarm zostanie uruchomiony jeszcze dwa razy w odstępach 5 minutowych.

Jeśli lekarstwo zostanie wyjęte na 15 minut przed czasem alarmu lub po prostu przezroczysta pokrywka zostanie przekręcona, alarm zostanie stłumiony.

Jeśli czasu alarmu nie słyszano i nie wyjęto leku, czas alarmu pozostanie na wyświetlaczu LCD jako przypomnienie.

Zwykle wyjmuje się wszystkie leki, a wszystkie czasy alarmów na wyświetlaczu LCD zmieniają się na "-:-". W nocy o godzinie 0:13 ustawione czasy alarmów są aktywowane, dzięki czemu pojemnik na lekarstwa następnego dnia ponownie pracuje z wcześniej ustawionymi czasami alarmów.

Usterki i ich usuwanie

1. Otworzyć pojemnik na tabletki przesuwając suwak "OPEN ►" z boku urządzenia w kierunku strzałki. Następnie za pomocą wykałaczki lub podobnego przyboru nacisnąć na otwór "RESET". Wszystkie czasy natychmiast zostaną zresetowane. Następnie od nowa trzeba ustawić godziny i czasy alarmu.



2. Jeśli urządzenie nie spełnia poszczególnych funkcji, należy sprawdzić dostarczoną baterię. Funkcje przypisane do odpowiedniej baterii można zobaczyć w punkcie "Wkładanie lub wymiana zużytej baterii".

Gwarancja

Udzielamy 2-letniej gwarancji od daty zakupu. Gwarantujemy niezawodne działanie urządzenia. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuwamy wszystkie usterki materiałowe lub produkcyjne. Jeżeli wbrew oczekiwaniom wystąpią usterki, proszę wysłać artykuł do importera. Proszę dołączyć dowód zakupu i krótki opis usterki.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

Dane techniczne

Napięcie robocze	<u>Funkcja zegara:</u> 3V (1 x CR 2032 lub CR 2025)
	<u>Funkcje oświetleniowe i alarmowe:</u> Bateria 1,5 V AAA (LR03)
Zegar	Zegarek kwarcowy, +/- 20 sekund/miesiąc
Możliwość wyboru alarmu:	dźwiękowy, wibracyjny lub akustyczny i wibracyjny
Liczba alarmów/dzień	5
Przegródki na lekarstwa	5
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 13 mm (godzina)
Wymiary	Ø 80 mm, wysokość 31 mm
Waga	96 g (łącznie z bateriami, bez lekarstw)
Podświetlenie wyświetlacza LCD	kolor niebieski

Importer

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf (Germany)

Rev. 11/01/2021/PL
PL - 6