

scala®

Pillendoos „Vergeet niks”

- tijd kwartsnauwkeurig,
- dagelijks tot 5 alarmtijden,
- alarm akoestisch, vibrerend of akoestisch en vibrerend



NL Gebruiksaanwijzing



Pillendoos „Vergeet niks” met vijf alarmtijden

Wij feliciteren u met de aankoop van dit kwaliteitsproduct van Scala. Om alle voordelen van dit apparaat correct te kunnen gebruiken, moet u zich voor het eerste gebruik in ieder geval vertrouwd maken met de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze vervolgens zorgvuldig om latere raadpleging mogelijk te maken.

Bijzonderheden:

De pillendoos helpt u uw dagelijkse inname van medicijnen te organiseren en herinnert u met de instelbare alarmtijden aan de inname tijdstippen.



Andere voordelen van de pillendoos:

- Ingebouwde kwartsklok met groot LCD-display (cijferhoogte: 13 mm).
- Er zijn 5 alarmtijden per dag programmeerbaar. Eenmaal geprogrammeerd, worden de alarmtijden dagelijks herhaald.
- Het alarm vindt akoestisch, vibrerend of akoestisch en vibrerend plaats.
- Een blauwe verlichting maakt het mogelijk om het apparaat ook in het donker veilig te bedienen.

Veiligheidsinstructies / gebruiksdoeleinde:

- ◆ De pillendoos bevat kleine onderdelen (batterijen, enz.), die door kleine kinderen kunnen worden ingeslikt en dus levensgevaarlijk kunnen zijn. Bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Wanneer een batterij of een ander onderdeel wordt ingeslikt, dan moet er onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- ◆ Bescherm het apparaat tegen zonlicht, tegen temperaturen boven 50°C en tegen binnendringend water.
- ◆ Laat de pillendoos niet vallen, open het apparaat alleen om de batterijen te vervangen of om een „reset” uit te voeren.
- ◆ Gebruik het apparaat alleen als pillendoos, iedere andere toepassing geldt als oneigenlijk en is hierbij namens de fabrikant verboden.

Instructies voor afvalverwerking

-  Defecte apparaten of apparaten die na afloop van de gebruiksduur niet langer worden gebruikt, kunnen restanten bevatten die een risico kunnen vormen voor het milieu. Lever het apparaat zoals voorgeschreven in bij een gemeentelijk inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparatuur.
-  Batterijen moeten op correcte wijze worden afgevoerd. In de batterijverkopende handel en in gemeentelijke inzamelpunten staan overeenkomstige houders ter beschikking om lege batterijen te deponeren.

Het apparaat




Plaatsen of vervangen van een lege batterij

De pillendoos wordt gevoed met twee batterijen. De lithiumbatterij CR 2025 of CR 2032 is verantwoordelijk voor de voeding van de klok (verwijder de beschermstrook!), een AAA-batterij (LR03) is nodig voor de alarmfuncties (akoestisch, vibrerend of akoestisch en vibrerend) en de verlichting van het LCD-display.

De CR 2025 of CR 2032 bevindt zich reeds in het apparaat. De AAA-batterij moet voor de ingebruikneming van de pillendoos in het batterijvak worden geplaatst (let op de correcte positie!).

Voor het vervangen of plaatsen van de AAA-batterij opent u de pillendoos door de schuifgrendel „OPEN ▶“ op de zijkant van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Daardoor heft u de vergrendeling tussen het boven- en benedendeel van het apparaat op en kunt u de beide helften van elkaar losmaken. Het batterijvak in het bovendeel is nu toegankelijk. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte positie!

Een batterijvervanging is noodzakelijk, wanneer het LCD-display contrast verliest (CR 2025 of CR 2032) of wanneer de verlichting of het alarm zwak wordt (LR03).

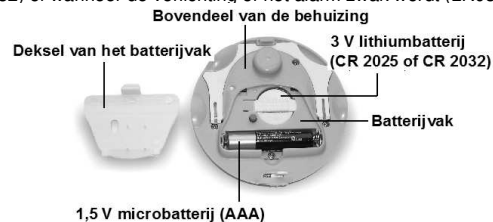

Instellen van de tijd

1. De schuifschakelaar „HOLD“ op de zijkant van het apparaat schuift u in de stand:




2. Druk ca. 3 seconden op de insteltoets voor de tijd (T-SET).

Op het LCD-display verschijnt **T.SET** en de uren knipperen.

3. Door aan de ring voor de instelling van de tijd te draaien, kunt u de uren instellen.

4. Druk opnieuw op de insteltoets voor de tijd (T-SET) en de minuten knipperen. Met de ring voor de instelling van de tijd stelt u de minuten in.

5. Door nogmaals op de toets „T-SET“ te drukken, sluit u de tijdstelling af. Op het LCD-display verdwijnt **T.SET**.

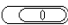Wanneer u de schuifschakelaar „HOLD“ in de stand  HOLD ▶ schuift, zijn alle toetsen buiten werking. D.w.z. de schuifschakelaar „HOLD“ is de beveiliging tegen een onbedoelde bediening van de toetsen.

Instellen van de vijf alarmtijden

1. De schuifschakelaar „HOLD“ op de zijkant van het apparaat schuift u in de stand:




2. Druk ca. 3 seconden op de toets „**SET**“ onder het LCD-display.

Op het LCD-display verschijnt **ALSET** en de 1^{ste} alarmtijd „1 -:- -“ knippert.

3. Door aan de ring voor de instelling van de tijd te draaien, kunt u de eerste alarmtijd in stappen van 30 minuten instellen.

4. Druk opnieuw op de toets „**SET**“ om het instellen van de eerste alarmtijd af te sluiten. De volgende alarmtijd „2 -:- -“ knippert.

U kunt de tweede (derde, vierde en vijfde) alarmtijd, net zoals de eerste alarmtijd, met de ring voor de instelling van de tijd instellen of indien u slechts één alarmtijd nodig hebt, met de toets „**SET**“ doorschakelen tot aan de vijfde alarmtijd en door nogmaals op de toets „**SET**“ te drukken, sluit u de instelling van de alarmtijd af. Op het LCD-display verdwijnt **ALSET**.

Nadat u de programmering van de alarmtijden hebt beëindigd, schuift u de schuifschakelaar „HOLD“ opnieuw in de positie  HOLD ▶.

Resetten van alle tijden (ook bij een functiestoring)

Open de pillendoos door de schuifgrendel „OPEN ▶“ op de zijkant van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Daarna drukt u door middel van een tandenstoker of dergelijke in de opening „RESET“. Onmiddellijk worden alle tijden gereset. De tijd geeft 12:00 aan en de alarmtijden „-:- -“.

Opening „RESET“




Vullen van de pillendoos met medicijnen

De pillendoos heeft aan de achterzijde vijf genummerde vakken voor medicijnen. Door het transparante deksel te draaien, kunt u de vakken vullen of medicijnen eruit nemen.



Deksel voor medicijnvakken

Verlichting van het LCD-display

Om de verlichting van het LCD-display gedurende ca. 10 seconden in te schakelen, schuift u eerst de schuifschakelaar „HOLD” in de stand:  „HOLD” en vervolgens drukt u op de lichttoets „Light”.

Instellen van het alarmtype

U kunt met de schuifschakelaar „BEEP VIB BEEP+VIB” kiezen tussen het akoestische alarm, het vibratiealarm of het akoestische alarm met vibratie. Dat is mogelijk zonder de schuifschakelaar „HOLD” te bedienen.



Het alarm / Het uitnemen van de medicijnen

Als u het alarm waarneemt, dan is het tijd om het medicijn uit het vak te nemen dat bij de alarmtijd hoort door het transparante deksel te draaien. Het draaien schakelt het alarm uit en de alarmtijd verdwijnt van het LCD-display. In de plaats daarvan staat er dan weer „:-:-”. Het alarm weerklinkt of vibreert ca. 30 seconden.

Als u vergeet om de medicijnen eruit te nemen, dan volgt het alarm met een interval van 5 minuten nog twee keer.

Wanneer u het medicijn tot 15 minuten voor de alarmtijd eruit neemt of het transparante deksel gewoon zomaar draait, dan wordt het alarm onderdrukt.


Als u een alarmtijd hebt gemist en het medicijn er niet wordt uitgenomen, dan blijft de alarmtijd ter herinnering op het LCD-display staan.

Normaal gezien hebt u alle medicijnen eruit genomen en zijn alle alarmtijden op het LCD-display veranderd in „:-:-”. Dagelijks om 0:13 uur worden de ingestelde alarmtijden opnieuw geactiveerd, zodat de pillendoos de volgende dag opnieuw met de voordien ingestelde alarmtijden werkt.

Storingen en mogelijke oplossingen

1. Open de pillendoos door de schuifgrendel „OPEN” op de zijkant van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Daarna drukt u door middel van een tandenstoker of dergelijke in de opening „RESET”. De klok- en alarmtijden moeten dan opnieuw worden ingesteld.

Opening „RESET”

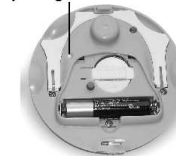

2. Wanneer het apparaat individuele functies niet uitvoert, dan moet u de daarvoor voorziene batterij controleren. Onder het punt „Plaatsen of vervangen van een lege batterij” zijn de functies beschreven die toegewezen zijn aan de desbetreffende batterij.

Garantie:

Vanaf de datum van aankoop verlenen wij gedurende 2 jaar garantie. Wij staan garant voor de foutloze werking van dit artikel. Binnen de garantieperiode verhelpen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mochten er zich onverhoopt gebreken voordoen, stuurt u het artikel dan naar de importeur. Sluit het bewijs van aankoop en een korte beschrijving van de fout bij, zodat uw zending snel bewerkt kan worden.

Wij bieden geen garantie op schade die door ondeskundig gebruik is ontstaan of schade aan de batterij of de verpakking

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	<u>klokkfunctie:</u> 3V (1 x CR 2032 of CR 2025)
	<u>licht- en alarmfuncties:</u> 1,5V AAA-batterij (LR03)
Tijd Alarm	kwartsklok, +/- 20 seconden/maand naar keuze: akoestisch, vibrerend of akoestisch en vibrerend
Aantal alarmen/dag	5
Medicijnenvakken.....	5
Display	LCD-display met 13mm cijferhoogte (tijd)
Afmetingen	Ø 80 mm, hoogte 31 mm
Gewicht	96 g (incl. batterijen, excl. medicijnen)
Verlichting van het LCD-display	blauw

Importeur

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,
14532 Stahnsdorf (Germany)