

# scala®

## Veterinaire thermometer SC 1080



### NL Gebruiksaanwijzing

Tijdens de meting wordt de actuele temperatuur permanent getoond en de „°C“ knippert tijdens de volledige meettijd. Na circa 30 seconden is de meting afgesloten.

Na de meting blijft de gemeten temperatuurwaarde tot de uitschakeling op het display staan. Bij de uitschakeling hoort u een signaaltoon. Wanneer het apparaat niet wordt uitgeschakeld, weerklinkt na ca. 8 minuten de signaaltoon en het apparaat schakelt vanzelf uit.

#### Functietest:

De correcte functie van de thermometer wordt elke keer bij de inschakeling automatisch gecontroleerd. Alle segmenten verschijnen en dan L°C. Wanneer een foute functie (meetnauwkeurigheid) wordt vastgesteld, dan wordt op het display „ERR“ (Error = fout) weergegeven.

#### Weergave van de laatste meetwaarde:

Als u bij de inschakeling de 0/I-toets langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de laatst gemeten waarde op het display weergegeven. Van zodra u de 0/I-toets opnieuw loslaat, gaat het apparaat naar de toestand bedrijfsklaar.

#### Reiniging en desinfectie:

De veterinaire thermometer SC 12 T is waterdicht. Hij mag in één van de ondervermelde reinigingsvloeistoffen gedompeld worden of met een vochtige doek, die één van de hierna vermelde desinfectiemiddelen bevat, afgeveegd worden.

Naam van het product	Fabrikant	Toepassing
Kodan® Tücher	Schülke & Mayr	overeenkomstig de gegevens van de fabrikant voor kunststofoppervlakken
EuroSept® Max Wipes	Henry Schein Inc.	
Medizid Rapid	Rösner-Maut by Meditrade GmbH	
Helipur® H plus N	B. Braun Melsungen	

#### Garantie:

We geven 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum en garanderen een onbeschadigde toestand. Tijdens de garantieperiode verhelpen we gratis alle materiaal- of fabricagefouten. Wanneer onverwacht gebreken zouden blijken, stuurt u het artikel best naar de klantendienst. Opdat we uw zending zo snel mogelijk zouden kunnen behandelen, voegt u er het aankoopbewijs en een korte beschrijving van het probleem bij. Van de garantie uitgesloten is schade, die te wijten is aan ondeskundige behandeling.

#### Bijzonderheden:

De veterinaire thermometer SC 1080 is een:


- snelle (meetresultaat na 15 - 25 seconden),
- waterdichte,
- maximumthermometer
- met grote LCD-display.

De respectievelijk laatste meetwaarde wordt opgeslagen en het apparaat is met een batterij voor ca. 2000 metingen uitgerust.

#### Veiligheidsaanwijzingen/doel:


- ♦ De SC 1080 is uitsluitend voorzien voor de meting van de lichaamstemperatuur bij grote dieren.
- ♦ De thermometer bevat elementen die ingeslikt kunnen worden door kinderen. Bewaar de thermometer daarom buiten bereik van kinderen.
- ♦ Bescherm de SC 1080 tegen zonlicht en temperaturen boven 50°C.
- ♦ Laat de SC 1080 niet vallen, buig hem niet en open hem niet (enkel het batterijvak ter vervanging van de batterijen).

#### Beschrijving van het apparaat:

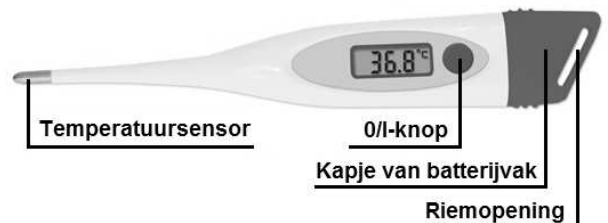

#### Bedieningshandleiding:

Druk op de 0/I-knop voor inschakeling. Een korte signaaltoon wijst op de toestand „ingeschakeld“. Tegelijk volgt een segmenttest (controle van alle segmenten op het display en een interne functietest (zie onder „Functietest“)).

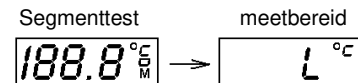

Vervolgens verschijnt bij een, aan de temperatuursensor aanwezige temperatuur van minder dan 32°C „L“ en „°C“. Na ca. 1 seconde begint de „°C“ te knipperen. De „L“ staat voor low (laag – lager dan 32°C).

#### Technische gegevens:

- Type: Maximumthermometer  
 Meetbereik: 32,0°C tot 43,9°C  
 Temperatuur < 32,0°C: Indicatie „L“ voor low (te laag)  
 Temperatuur > 43,9°C: Indicatie „H“ voor high (te hoog)  
 Meetnauwkeurigheid: +/- 0,1°C tussen 35,5°C tot 42,0°C bij een omgevingstemperatuur van 18°C tot 28°C.  
 Zelftest: Autom. interne controle op testwaarde 37,0°C. Bij een afwijking > 0,1°C wordt „Err“ weergegeven.  
 Weergave: LCD-display met 3 posities.  
 Batterijtype: 1 stuk: LR 41 of SR 41.  
 Batterijweergave: Het symbool geeft weer dat de batterij leeg is.  
 Bewaartemperatuur: 0°C tot 50°C.

#### Aanwijzingen voor afvalverwerking

Na de gebruiksduur dient u het apparaat vakkundig te verwijderen via een openbare inzamelplaats voor oude elektrische toestellen.

Batterijen moeten vakkundig bij het afval verwerkt worden. Daarvoor staan in de batterij verkopende winkels evenals in gemeentelijke verzamelpunten daarvoor voorziene containers ter beschikking.

#### Marges van de lichaamstemperatuur bij grote dieren

- Rund:** 38,0°C – 39,5°C  
**Varken:** Volwassen dieren: 38,0°C – 39,5°C  
 Jonge dieren: 38,0°C – 40,0°C  
**Paard:** Volwassen dieren: 37,5°C – 38,0°C  
 Veulen: 37,5°C – 38,5°C  
**Schaap:** Volwassen dieren: 38,5°C – 40,0°C  
 Lammeren tot 1 jaar: 38,5°C – 40,5°C

#### Verklaring van de symbolen

	Fabrikant
	Het CE-keurmerk staat in verband met de EU-richtlijn
	Toepassingsdeel type BF
	Aanwijzingen voor afvalverwerking
	Productiemaand en -jaar
	Gebruiksaanwijzing lezen!
	konform met de EU-richtlijn 2002/95/EG

Scala Electronic GmbH  
 Ruhlsdorfer Straße 95  
 14532 Stahnsdorf  
 www.scala-electronic.com