

La boîte à pilules „N'oubliez rien“ avec cinq durées d'alarme

Félicitations pour votre achat de produit Scala qualité. Pour profiter pleinement, correctement, de cet appareil, vous devez vous familiariser avant la première utilisation avec les instructions d'utilisation. Gardez celles-ci alors pour les consulter ultérieurement.

Particularités:

La boîte à pilules vous aide à organiser votre prise quotidienne de médicaments et vous rappelle les temps de prise de ceux-ci avec les temps réglables d'alarme.

Autres avantages de la boîte à pilules

- Horloge au Quartz intégrée avec un affichage LCD plus grand (hauteur de chiffre: 13 mm).

- 5 temps d'alarme par jour sont programmable. Une fois programmé, les temps d'alarme se répètent chaque jours.

- L'alarme se réalise de manière acoustique, vibrante ou acoustique et vibrante

- Un éclairage bleu permet un pilotage sécurisé même dans l'obscurité.

- **La boîte à pilules dispose d'un dispositif de propre de mesure de la tension.**

Informations de sécurité / Destination de l'utilisation:

- ♦ La boîte à pilules contient des petites pièces (piles, etc.), qui peuvent être ingérées par de petits enfants et peuvent ainsi être en danger de mort. Conservez alors, de ce fait, l'appareil de manière inaccessible pour les enfants. Si une pile ou une autre petite pièce a été ingérée, un médecin doit être immédiatement consulté.

- ♦ Protégez l'appareil contre la lumière du soleil, des températures supérieures à 50°C et contre l'eau s'infiltrant.

- ♦ Ne faites pas tomber la boîte à pilules, N'ouvrez l'appareil que pour le remplacement des piles ou pour réaliser un „Reset“.

- ♦ Veuillez n'employer l'appareil que comme boîte à pilules, toute autre emploi est considéré comme étrangère à sa destination et est ainsi interdite au nom du fabricant.

Instructions de mise aux déchets




Les appareils défectueux ou en fin de la durée de vie peuvent contenir des résidus qui pourraient constituer un risque pour l'environnement. Veuillez jeter l'appareil correctement à un point de collecte communale des déchets électriques.



Les piles doivent être éliminées de façon appropriée. Aux points de vente ou aux points de collecte municipale, des conteneurs appropriés sont disponibles pour l'élimination de la batterie.

L'appareil

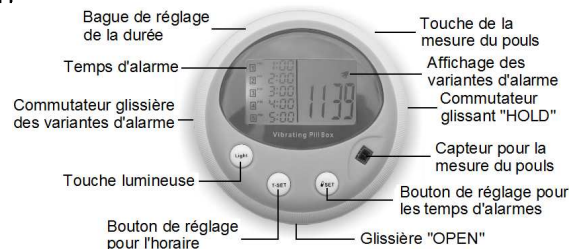

Disposition ou remplacement d'une pile usée


La boîte à pilules est pilotée par deux piles.

La pile au Lithium CR 2025 ou CR 2032 alimente l'horloge et la mesure de pulsation cardiaque (**Veuillez retirer la bande de protection !**), une pile AAA est (LR03, R03) nécessaire pour les fonctions d'alarme (acoustique, vibrant ou acoustique et vibrant) et l'éclairage de l'affichage LCD.

La pile CR 2025 ou CR 2032 est déjà installée. La pile AAA doit être disposée dans le logement de pile avant la mise en service de la boîte à pilules (respecter la position de la disposition !).

Pour le remplacement des piles ou pour le positionnement de la pile AAA, vous ouvrez la boîte à pilules en poussant la partie coulissante „OPEN ►“ sur le côté de l'appareil dans la direction de la flèche. Avec cela, vous libérez l'arrêt entre la partie inférieure et la partie supérieure de l'appareil et les deux moitiés peuvent être séparées l'un de l'autre. Le logement de piles est maintenant accessible dans la partie supérieure, veuillez prêter attention lors de la disposition des piles quant à un positionnement correct!

Un remplacement de piles est nécessaire si l'affichage LCD perd du contraste (CR 2025 ou CR 2032), ou lorsque l'éclairage ou l'alarme devient faible (LR03).

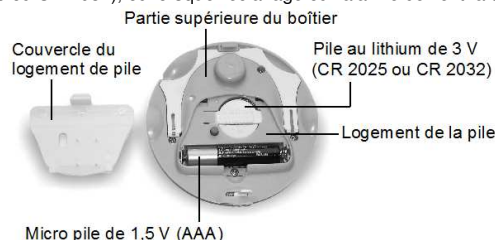

Réglage de l'horloge

1. Glissez l'interrupteur coulissant „HOLD“ sur le côté de l'appareil en position :



2. Appuyez durant environ 3 secondes sur le bouton de réglage pour un horaire (T-SET).

Sur l'affichage LCD apparaît **T.SET** et les heures clignotent.

3. Par rotation de la bague de réglages du temps, vous pouvez régler les heures.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de l'horaire (T-SET) et les minutes clignotent. Réglez les minutes avec la bague de réglage de l'horaire.


5. Avec une pression ultérieure sur le bouton „T-SET“, référez le réglage de l'horaire. L'affichage LCD **T.SET** disparaît.

Lorsque vous déplacez l'interrupteur glissant „HOLD“ en position

HOLD ► „Tous les boutons sans fonction, cela signifie, que l'interrupteur glissant „HOLD“ est bloqué contre toute commande involontaire des boutons.

Réglage des cinq durées d'alarme

1. Glissez l'interrupteur coulissant „HOLD“ sur le côté de l'appareil en position :

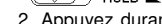


2. Appuyez durant environ 3 secondes sur le bouton „▼SET“ sous l'affichage LCD. Sur l'affichage LCD apparaît **AL.SET** et le 1er temps d'alarme „[1] -:-“ clignote.

3. Par rotation de la bague de réglages du temps, vous pouvez régler le premier temps d'alarme par étape de 30 minutes.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton „▼SET“ et référez le réglage du premier temps d'alarme.. Le temps d'alarme suivant „[2] -:-“ clignote.

Vous pouvez également régler le second temps d'alarme (troisième, quatrième et cinquième) comme le premier temps d'alarme avec la bague de réglage du temps ou dans le cas où un seul temps d'alarme est nécessaire avec le bouton „▼SET“, commuter jusqu'au cinquième temps d'alarme et refermer le réglage des temps d'alarme avec une pression supplémentaire sur le bouton „▼SET“. L'affichage LCD **AL.SET** disparaît.

Après que vous ayez terminé la programmation des temps d'alarme, Déplacez l'interrupteur coulissant „HOLD“ de nouveau dans la Position

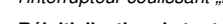


Réinitialisation de toutes les durées

(également en cas de fonction défectueuse)

Ouvrez la Boîte à pilules en glissant le bouton glissant „OPEN ►“ le côté de l'appareil dans le sens de la flèche. Appuyez alors au moyen d'un cure dent ou de quelque chose de similaire dans l'ouverture „RESET“. Les temps seront réinitialisés immédiatement. L'horloge indique 12:00 et les temps d'alarme „-:-“.

Ouverture de "RESET"

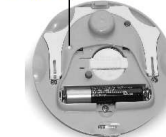

Remplissage de la boîte à pilules avec des médicaments

La boîte à pilules possède à l'arrière, 5 tiroirs numérotés pour la prise des médicaments. Vous pouvez remplir ou vider les tiroirs des médicaments en tournant le couvercle transparent.



Couvercle pour les tiroirs de médicaments

Eclairage de l'affichage LCD

Pour allumer l'éclairage de l'affichage LCD pour une durée d'environ 10 secondes. Déplacez en premier lieu l'interrupteur glissant „HOLD” dans la position:

 HOLD ➤ et appuyez ensuite sur le bouton de l'éclairage „Light”.

Réglage du type d'alarme

Vous pouvez choisir, avec l'interrupteur glissant entre une alarme acoustique, une alarme vibrante ou une alarme acoustique vibrante „BEEP VIB BEEP+VIB”. Il est possible de piloter sans l'interrupteur glissant „HOLD”.



L'alarme / Le retrait de médicaments

Si vous remarquez l'alarme, il est alors temps de prendre le médicament contenu dans le tiroir correspondant au temps de l'alarme, par rotation du couvercle transparent. La rotation met l'alarme à l'arrêt et le temps de l'alarme s'éteint sur l'affichage. Après cela, se trouve alors de nouveau à cet endroit „-:-”. L'alarme retentit ou vibre environ 30 secondes.

Si vous manquez le retrait du médicament, une alarme retentit à intervalles de 5 minutes, deux fois.

Si vous prenez le médicament jusqu'à 15 minutes avant l'heure de l'alarme, ou juste que vous tourniez le couvercle transparent, l'alarme est supprimée.

Si vous avez raté un horaire d'alarme et que le médicament n'est pas pris, le temps d'alarme reste en mémoire sur l'écran LCD.

En cas normal, vous avez pris tous les médicaments et tous les temps d'alarme sont passés sur l'affichage en „-:- -:-”. Chaque jours à 0:13 heure, les temps d'alarme réglés seront réactivés de telle manière que la boîte à pilules travaille de nouveau le jour suivant avec les temps d'alarme réglés.

Le dispositif de mesure du pouls

La boîte à pilules dispose d'une fonction propre également pour la mesure de la pulsation cardiaque.

ATTENTION: Le dispositif de mesure de pulsations cardiaques ne possède qu'un caractère informatif et n'est pas approprié pour la modification du dosage de vos médicaments. Consultez toujours, en cas de doutes, votre médecin traitant.

Emploi du dispositif de mesure de pouls

1. Glissez l'interrupteur coulissant „HOLD” sur le côté de l'appareil en position :

 HOLD ➤

2. Appuyez brièvement sur le bouton pour la mesure de pulsation cardiaque „PULSE START” sur le côté la boîte à pilules. Sur l'affichage LCD, un cœur et „- - -” apparaissent.

3. Placez une surface du doigt sur le capteur de la pulsation cardiaque de telle manière que le cœur commence à clignoter. Le clignotement symbolise que l'appareil a trouvé une pulsation évaluable.

4. Votre pouls sera affiché après environ 15 à max. 60 secondes (fréquence de pulsation cardiaque par minute).

Après que vous ayez terminé la mesure de la pulsation cardiaque, glissez l'interrupteur coulissant „HOLD” de nouveau en position  HOLD ➤.

Incidents et leur éliminations

1. Ouvrez la boîte à pilules en glissant le bouton coulissant „OPEN ➤” sur le côté de l'appareil dans le sens de la flèche. Appuyez alors, au moyen d'un cure dent et d'un objet similaire, dans l'ouverture „RESET”. Les temps d'alarme et d'horaire doivent alors être réglés.

2. Si l'appareil n'exécute pas chacune des fonctions, veuillez alors contrôler la pile prévue pour cette fonction. Les fonctions attribuées à la pile correspondante sont consultables sous le point „Installation ou remplacement d'une pile usée”.

Caractéristiques techniques

Tension de service

Fonctionnement de l'horloge, mesure pouls:

3V (1 x CR 2032 ou CR 2025)

Alarme lumineuse et fonction d'alarme:

Pile 1,5V AAA- (LR03 ou R03)

Horaire Quartz, +/- 20 secondes/Mois

sélectionnable: acoustique, vibrant ou acoustique et vibrant

Horloge

Alarme

Nombre d'alarme/Jour

5

Tiroirs à médicaments

5

Affichage

Affichage LCD avec 13mm hauteur de chiffre (horaire)

Mesure

Ø 80 mm, hauteur 31 mm

Masse

96 g (y compris piles, sans médicaments)

Mesure du pouls

Nombre pulsations cardiaques par minutes

Eclairage de l'affichage de LCD bleu

Vente et service clients

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf (Germany)

scala®

Boîte à pilules „N'oublie rien“

- Horaire précis au quartz,
- Quotidiennement jusqu'à 5 temps d'alarme,
- Alarme acoustique, vibrant ou acoustique et vibrant
- Fonctionnement de mesure du pouls



F Mode d'emploi



Rev. 09/02/2017/F