

scala®

## Pettine per pidocchi elettrico SC 04



ⓘ Istruzioni per l'uso

### **DESTINAZIONE**

- Il pettine per pidocchi elettrico non è un apparecchio medicale.
- L'apparecchio è in grado di uccidere solo pidocchi adulti. Le uova (lendini) e i pidocchi allo stadio larvale non vengono uccisi.

### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- Prima del primissimo utilizzo, si raccomanda di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- Conservare sempre le presenti istruzioni per l'uso, affinché possano essere consultate in un secondo momento.
- Non toccare il pettine metallico con le dita mentre è in funzione.
- Utilizzare l'apparecchio solo sui capelli asciutti.
- Non utilizzare mai l'apparecchio nella bocca, il naso, gli occhi, le sopracciglia, sulla pelle nuda o altre parti delicate

del corpo.

- L'apparecchio non è adatto per persone che soffrono di epilessia, malattie cardiache o perdita di capelli.
- Se i bambini sono infestati da pidocchi, il trattamento sarà consentito solo da parte di persone adulte.
- Il pettine per pidocchi elettrico può influenzare apparecchiature elettroniche utilizzate da parte di utenti nel proprio corpo.
- Evitare l'applicazione su capelli molto grassi.
- Evitare di fare cadere l'apparecchio o di esporlo a forti urti.
- Non fare venire in contatto l'apparecchio con liquidi. L'apparecchio non è impermeabile all'acqua.


### **DA OSSERVARE INOLTRE**

- Utilizzare soltanto batterie secondo le specifiche riportate nelle presenti istruzioni per l'uso alla voce "Dati tecnici".
- Quando non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato, si raccomanda di rimuovere la batteria.

### **FUNZIONAMENTO DEL PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI**

L'elettronica dell'apparecchio alimenta una tensione elettrica non pericolosa per l'uomo sul pettine metallico. Passando con il pettine metallico sui capelli asciutti e venendo in contatto con un pidocchio adulto, questa tensione è sufficiente per uccidere il parassita. La spia di segnalazione a LED indica che è stato riconosciuto e ucciso un pidocchio. Dopodiché spegnere l'apparecchio e rimuovere il pidocchio ucciso dal pettine metallico (si veda a pagina 4). Si consiglia di trattare ogni due giorni i capelli con il pettine per pidocchi. In questo modo è possibile garantire che dopo 3-4 settimane sono stati uccisi tutti pidocchi che si trovavano ancora nell'uovo o allo stadio la larvale all'inizio del trattamento.

## L'APPARECCHIO

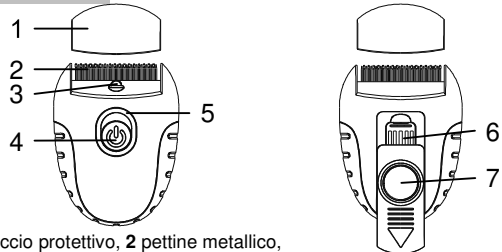

1 cappuccio protettivo, 2 pettine metallico, 3 LED-Spotlight, 4 tasto di funzione, 5 spia a LED, 6 spazzola, 7 lente

## IL TASTO DI FUNZIONE

Il tasto di funzione (4) possiede tre posizioni:

### 1. Controllo tensione batteria:


Il tasto di funzione viene spinto leggermente in avanti (nella posizione centrale). La spia di segnalazione a LED dovrebbe illuminarsi in verde. Se la tensione della batteria non è più sufficiente per il funzionamento dell'apparecchio, si accende la spia di segnalazione a LED rossa.

### 2. Condizione/LED-Spotlight

Spingere il tasto di funzione completamente in avanti. A questo punto l'apparecchio è operativo e il pettine metallico viene illuminato.

### 3. OFF:

Il tasto di funzione viene spostato in posizione di partenza. La spia di segnalazione a LED per l'operatività si spegne.

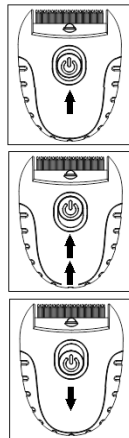

I-3


## UTILIZZO DEL PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI

### Premessa per un'applicazione efficace:

- I capelli devono essere asciutti.
- Nei capelli non devono trovarsi alcuni prodotti per la messa in piega.
- I denti del pettine metallico non devono essere piegati o venire in contatto fra di loro.

### Applicazione:


1. Staccare il cappuccio protettivo trasparente dall'apparecchio.

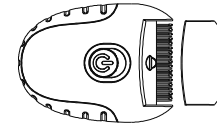

2. Spingere il tasto di funzione sulla posizione Condizione/LED-Spotlight. Deve accendersi il LED verde. In caso contrario sarà necessario cambiare la batteria (si veda a pagina 5).

Mantenere il pettine metallico in un angolo di 45° (il tasto di funzione si trova nella parte rivolta verso i capelli - si vedano le illustrazioni) e iniziare a pettinare. Le punte del pettine metallico devono iniziare dalle radici dei capelli. Il LED Spotlight è particolarmente utile sui capelli scuri, per riconoscere i pidocchi.

Una volta ucciso un pidocchio, si accende la spia a LED rossa. Spegner l'apparecchio e rimuovere il pidocchio dal pettine metallico con una spazzola.

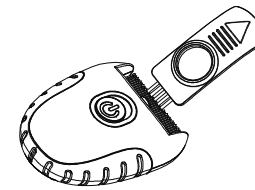


Successivamente si può proseguire l'applicazione.

I-4

### **CAMBIO DELLA BATTERIA**

Per il funzionamento l'apparecchio richiede una batteria alcalina perfetta del tipo tradizionale AAA (LR03). Non utilizzare batterie di zinco/carbone (R03) o una batteria ricaricabile di tipologia identica. Rispettare la polarità al cambio della batteria!

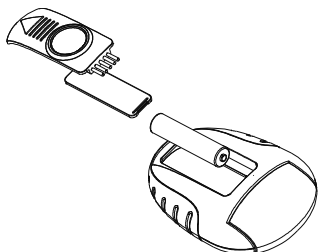


Per cambiare la batteria, rimuovere la spazzola con la lente. Dopodiché si potrà accedere al coperchio del vano della batteria. Cambiare la batteria esaurita.

### **PULIZIA E CONSERVAZIONE**

#### Pulizia:

- pulire il pettine metallico con una spazzola. La pulizia deve essere effettuata con il pettine per pidocchi SC 04 spento.

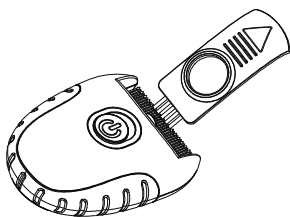

- Non utilizzare dei liquidi detergenti per pulire l'apparecchio. Consigliamo di pulire periodicamente l'apparecchio con una spugnetta imbevuta d'alcol disponibile in farmacia.

#### Conservazione:

- Conservare fundamentalmente l'apparecchio solo con il cappuccio protettivo applicato.
- Evitare ambienti sporchi, umidi e temperature elevate.

### **INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO**









Quando l'apparecchio non sarà più utilizzabile, si raccomanda di smaltirlo in modo appropriato attraverso i centri di raccolta comunali di apparecchiature elettriche.



Batterie scariche devono essere smaltite in modo appropriato. A tal fine nei negozi che vendono batterie nonché nei centri di raccolta comunali si trovano rispettivi contenitori di raccolta per garantire uno smaltimento appropriato.

### **SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI**

	Produttore
	Conforme alle norme UE
	Nota sullo smaltimento
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
 mm/aa	Periodo di produzione mese/anno
	Proteggere dal bagnato

#### **GARANZIA**

Le disposizioni di legge. Si garantisce perciò la perfetta proprietà di questo articolo. Durante il periodo di garanzia rimediamo gratuitamente tutti i difetti di materiale o produzione. Qualora, contro ogni aspettativa, dovessero verificarsi dei difetti, si prega di spedire l'articolo in stato accuratamente confezionato al servizio di assistenza clienti. Affinché la Vostra spedizione possa essere disbrigata rapidamente, si prega di allegare la ricevuta d'acquisto e una breve descrizione dell'errore.

#### **DATI TECNICI**

Condizioni operative: 10 ° C - 40 ° C,  
25% -80% RH. umidità  
Dimensioni: 90 x 60 x 27 mm  
Peso: 42 g (senza batteria)  
Alimentazione: 1 x batteria alcalina AAA  
(LR03)



K-jump Health Co. Ltd.  
No. 56, Wu Kung 5th Rd.  
New Taipei City 24890  
Taiwan

**Importatore /  
Servizio di assistenza**  
SCALA Electronic GmbH  
Ruhlsdorfer Str. 95  
14532 Stahnsdorf  
Germany