
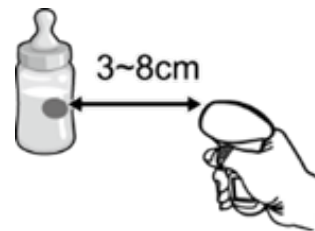


INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8280

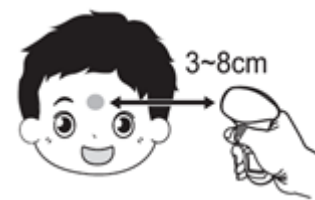

Infrarot - Stirn - Thermometer SC 8280

- Messung über der Stirn – kontaktlos
- Messabstand 3-8 cm
- 1 ca. Sekunde Messzeit
- 10 Speicherplätze
- Signalton
- Fieberalarm
- Batteriebetrieb

Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8280 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Stirn. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden.

Das SC 8280 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde. Nach erfolgreicher Messung werden die 10 letzten Messwerte werden gespeichert werden. Die beigefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 5.000 Messungen



EAN 4022356014452
PZN.: 17147807
Art.-Nr.: 01445

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 26.05.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8280

Spezifikation

Messung	Infrarot
Messort	Stirn (Kontaktlos) / Objekt
Messbereich - Stirn	32,2°C bis 43,3°C
Messbereich - Objekt	0,0°C - 100,0°C
Messdauer	ca. 1 Sekunde
Messabstand	3 - 8 cm
Auflösung	0,1°C
Abweichung	34,0°C bis 43,0°C: +/-0,3°C andere Bereiche: +/-0,4°C
Display	LCD-Display, 3 digits
Arbeits- Temperatur	Temperatur: 16°C bis 35°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager- Temperatur	Temperatur: -25°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	2 x AAA (LR03), Kapazität 1050 mAh, Gewicht 11 gr
Batterie- Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Speicher	10 Messungen
Abschaltung	Automatisch nach 60 Sekunden Inaktivität
Abmessung	138 x 90 x 45 mm
Gerät Gewicht	ca. 132 g inklusive Batterie
Fabre	weiß
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,2	17,5x6,5x11 cm
Innerkarton	6	1,48	23x18x21 cm
Umkarton	36	8,45	63x40x41 cm
Lage	144	33,8	120x80x40 cm
Palette	576	299	120x80x160 cm

EAN 4022356014452
PZN.: 17147807
Art.-Nr.: 01445

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 26.05.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über
Medizinprodukte