


## INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8360

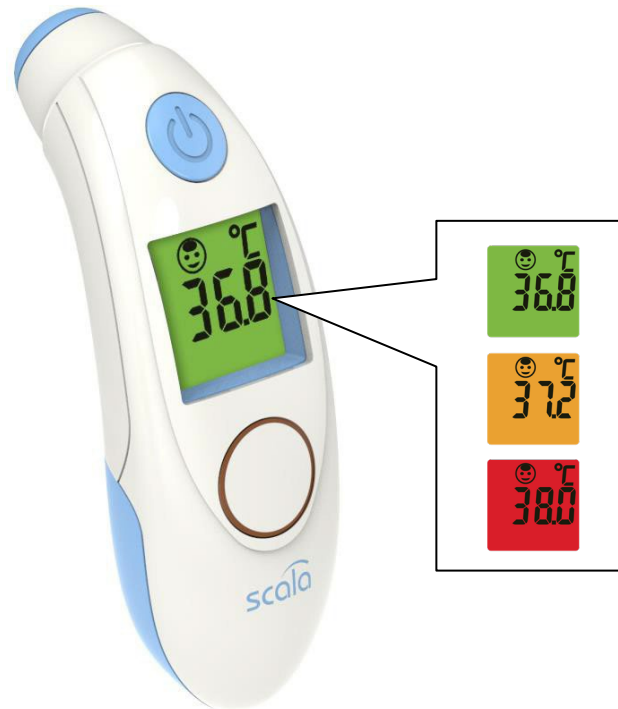

### Infrarot - Stirn - Thermometer SC 8360

- Messung über der Stirn - kontaktlos, oder Objekt
- 1 ca. Sekunde Messzeit
- 9 Speicherplätze
- Signalton
- Fieberalarm
- Temperaturanzeige mit beleuchtetem Display
- Batteriebetrieb

Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8360 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Stirn. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden.

Das SC 8360 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde. Nach erfolgreicher Messung werden die neun letzten Messwerte werden gespeichert werden. Die beigefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen.



EAN 4022356083601  
Art.-Nr.:08360

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

# INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8360

## Spezifikation

Messung	Infrarot
Messort	Stirn / Objekt
Messabstand	2 cm
Messbereich	Stirn: 32,0°C bis 43,3°C Objekt: 0 - 100°C
Messdauer	ca. 1 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Abweichung	Stirn: 35,5°C bis 42,0°C: +/- 0,2°C andere Bereiche: +/- 0,3°C Objekt: +/- 1,0°C
Fieberalarm	ab 37,5°C mit schneller Piep-Ton- Folge
Display	LCD-Display, 3 Digits, Temperaturanzeige mit beleuchtetem Display
Arbeits- Temperatur	Temperatur: 16°C bis 35°C, 15% bis 90% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Lager- Temperatur	Temperatur: -20°C bis +50°C, 15% bis 90% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Batterie Info	2 x (R03, LR03 (1,5V), Kapazität 1050mAh, Gewicht 11 gr)
Batterie- Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Speicher	9 Messungen
Abschaltung	Automatisch nach ca. 10 Sek
Abmessung	41,4 x 44 x 124 mm
Gerät Gewicht	ca. 88 g inklusive Batterie
Fabre	Weiß (blau Taste)
Zertifiziert nach	ISO 13485 und ISO 80601-2-56
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,137	8x16,2/20x6
Innerkarton	10	1,49	34x9x33
Umkarton	100	16,98	67x51x35
Lage	400	67,92	120x80x35
Palette	2000	339,6	120x80x175

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.: 13.09.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

EAN 4022356083601  
Art.-Nr.:08360

CE  
0197